

## Entrez dans le monde de Cardioline

### Walk200b


Enregistreur ambulatoire de surveillance de la pression artérielle



- Moniteur de pression artérielle enregistrant jusqu'à 24 heures. Disponible avec connectivité Bluetooth ou USB.
- Compatible avec le logiciel d'analyse Cardioline CubeABPM.
- Pompe simple à utiliser, petite, légère et silencieuse pour maximiser le confort du patient.
- Algorithme auto-adaptatif pour contrôler l'inflation du brassard.
- Écran LCD pour afficher les valeurs mesurées et les messages de service.
- Possibilité d'enregistrer manuellement des événements tout au long de l'enregistrement.

## Spécifications techniques

Méthode	Oscillométrique
Plage de valeurs de pression	Systolique de 60 à 290 mmHg Diastolique de 30 à 195 mmHg
Plage d'impulsions	30 à 240 battements par minute
Plage de mesure	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 90 et 120 minutes
Protocole de mesure	2 groupes d'intervalles modifiables
Capacité de stockage	300 mesures
Transfert de données	Bluetooth (classe 1 / 100 m) USB (en option)
Capacité de la batterie	> 300 mesures
Dimensions	128 x 75 x 30 mm
Poids	240 g avec piles

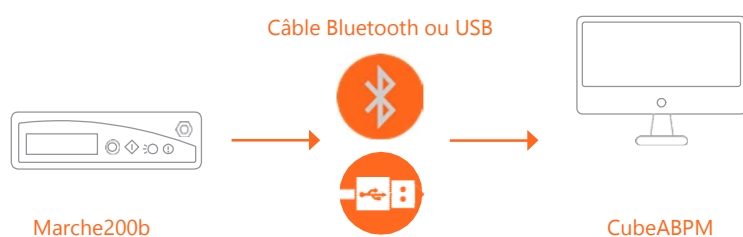

**Utilisation autonome :** les examens peuvent être téléchargés à partir d'enregistreurs vers le logiciel CubeABPM via Bluetooth ou un câble USB pour être analysés, rapportés et archivés.

**Applications de télémédecine :** les examens peuvent être téléchargés à partir des enregistreurs et envoyés à l'ABPM Web de Cardioline pour analyse et Rapports à distance.

